

**Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование  
Российской Федерации**

---

**4.1. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ**

**Измерение концентраций вредных веществ  
в воздухе рабочей зоны**

**Методические указания  
МУК 4.1.1352—4.1.1370—03**

**Выпуск 41**

**Москва • 2006**

**Федеральная служба в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека**

**4.1. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ**

**Измерение концентраций вредных веществ  
в воздухе рабочей зоны**

**Методические указания  
МУК 4.1.1352—4.1.1370—03**

**Выпуск 41**

**ББК 51.21**

**И37**

**И37 Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны: Методические указания.—М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2006.—176 с.—Вып. 41.**

**ISBN 5—7508—0614—6**

1. Методические указания подготовлены: Научно-исследовательским институтом медицины труда РАМН, в составе Л. Г. Макеева (руководитель), Г. В. Муравьева, Е. М. Малинина, Е. Н. Грицун, Г. Ф. Громова, при участии А. И. Кучеренко (Департамент госсанэпиднадзора Минздрава России).

2. Рекомендованы к утверждению на совместном заседании группы Главного эксперта Комиссии по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию по проблеме «Лабораторно-инструментальное дело и метрологическое обеспечение» и методбюро п/секции «Промышленно-санитарная химия» Проблемной комиссии «Научные основы гигиены труда и профпатологии».

3. Рекомендованы к утверждению Комиссией по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию при Министерстве здравоохранения Российской Федерации.

4. Утверждены и введены в действие Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, Первым заместителем Министра здравоохранения РФ Г. Г. Онищенко 16 мая 2003 г.

5. Введены впервые.

**ББК 51.21**

**© Роспотребнадзор, 2006  
© Федеральный центр гигиены и  
эпидемиологии Роспотребнадзора, 2006**

## I. Введение

Сборник методических указаний «Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны» (Вып. 41) разработан с целью обеспечения контроля соответствия фактических концентраций вредных веществ их предельно допустимым концентрациям (ПДК) и ориентировочным безопасным уровням воздействия (ОБУВ) и является обязательным при осуществлении санитарного контроля.

Включенные в данный сборник 19 методик контроля вредных веществ в воздухе рабочей зоны разработаны и подготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005—88 ССБТ «Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования», ГОСТ Р 8.563—96 «Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений», МИ 2335—95 «Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа», МИ 2336—95 «Характеристики погрешности результатов количественного химического анализа. Алгоритмы Оценивания».

Методики выполнены с использованием современных методов исследования, метрологически аттестованы и дают возможность контролировать концентрации химических веществ на уровне и ниже их ПДК и ОБУВ в воздухе рабочей зоны, установленных в гигиенических нормативах – ГН 2.2.5.686—98 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны», дополнениях 2,3,4,6 к ним и дополнениях 2,3,4 и 5 к ГН 2.2.5.687—98 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».

Методические указания по измерению массовых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны предназначены для центров госсанэпиднадзора, санитарных лабораторий промышленных предприятий при осуществлении контроля за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также научно-исследовательских институтов и других заинтересованных министерств и ведомств.

УТВЕРЖДАЮ

Главный государственный санитарный  
врач Российской Федерации,  
Первый заместитель Министра  
здравоохранения Российской Федерации  
Г. Г. Онищенко

16 мая 2003 г.

Дата введения: с момента утверждения

## 4.1. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

### Измерение массовых концентраций

**3-[3-(4-бром-1,1-бифенил-4-ил)-3-гидрокси-1-  
фенилпропил]-4-гидрокси-2Н-1-бензопиран-2-он  
(бромадиалона) зоны методом высокоеффективной  
жидкостной хроматографии в воздухе рабочей**

### Методические указания


МУК 4.1.1352—03

#### 1. Область применения

Настоящие методические указания устанавливают количественный анализ воздуха рабочей зоны на содержание бромадиалона методом высокоеффективной жидкостной хроматографии в диапазоне концентраций 0,0005—0,005 мг/м<sup>3</sup>.

#### 2. Характеристика вещества

##### 2.1. Структурная формула

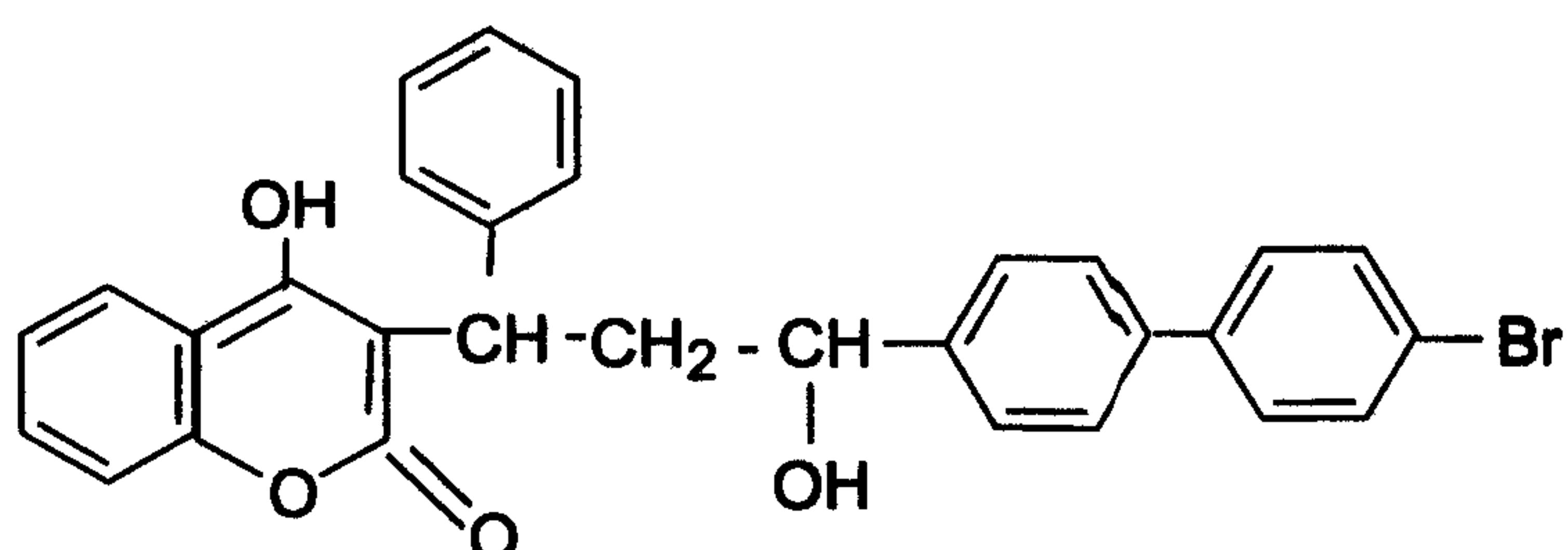

2.2. Эмпирическая формула C<sub>30</sub>H<sub>23</sub>BrO<sub>4</sub>.

2.3. Молекулярная масса 527,44.

2.4. Регистрационный номер CAS 28772-56—7.

2.5. Физико-химические свойства.

Бромадиалон – белое кристаллическое вещество, температура плавления 200—210 °С, не растворим в воде, эфире, гексане, хорошо растворим в ацетоне, хлороформе, этаноле.

Агрегатное состояние в воздухе – аэрозоль.

2.6. Токсикологическая характеристика.

Бромадиалон является антикоагулянтом (нарушает свертываемость крови, повышает проницаемость сосудов).

Ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) бромадиалона в воздухе рабочей зоны – 0,001 мг/м<sup>3</sup>.

### **3. Погрешность измерений**

Методика обеспечивает выполнение измерений бромадиалона с погрешностью, не превышающей ± 17 % при доверительной вероятности 0,95.

### **4. Метод измерений**

Измерение массовой концентрации бромадиалона выполняют методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с УФ-детектированием при длине волны 280 нм.

Отбор проб проводят с концентрированием на фильтр.

Нижний предел измерения содержания бромадиалона в анализируемом объеме пробы – 0,01 мкг.

Нижний предел измерения концентрации бромадиалона в воздухе 0,0005 мг/м<sup>3</sup> (при отборе 240 дм<sup>3</sup> воздуха).

Измерению не мешают сопутствующие вещества: дифенацин, хлорфасинон.

### **5. Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы, реактивы**

При выполнении измерений применяют следующие средства измерений, вспомогательные устройства, материалы, реактивы:

#### **5.1. Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы**

Хроматограф жидкостный фирмы «Waters» США, модель 996 с градентной системой элюирования, автосэмплером и УФ-детектором типа «диодная матрица»

## **МУК 4.1.1352—03**

**Колонка аналитическая, хроматографическая  
из нержавеющей стали длиной 250 мм и внутренним  
диаметром 4,6 мм, заполненная Separon C-18  
(размер частиц 5 мкм)**

Аспирационное устройство, модель 822	ГОСТ 2.6.01—86
Фильтродержатель	ТУ 95-72-05—77
Фильтры обеззоленные «синяя лента»	ТУ 6-09-1676—77
Весы аналитические ВЛР-200	ГОСТ 24104—88Е
Колбы мерные, вместимостью 25 см <sup>3</sup>	ГОСТ 1770—74Е
Стаканы химические, вместимостью 25 см <sup>3</sup>	ГОСТ 25336—82Е
Пипетки, вместимостью 1,2,5 и 10 см <sup>3</sup>	ГОСТ 29227—91
Пробирки колориметрические, вместимостью 10 см <sup>3</sup>	ГОСТ 25336—82Е
Ротационный испаритель ИР-1М с набором колб	ТУ 25-11-917—76

### **5.2. Реактивы**

**Бромадиалон – продукт фирмы  
«Cipa Agrochimica» Италия, с содержанием  
основного вещества не менее 95 %,  
сертификационный № 02990531**

Ацетонитрил, хч, для жидкостной хроматографии	ТУ 6-09-14-2167—84
Вода бидистиллированная	ГОСТ 7602—72
Спирт метиловый, хч	ГОСТ 6995—67
Хлороформ, ч	ТУ 6-09-4263—76
Ортофосфорная кислота, 0,2 %-ный (по объему) раствор	ГОСТ 10678—76

**Допускается использование других средств измерения, вспомо-  
гательного оборудования, материалов и реактивов с техническими и  
метрологическими характеристиками и квалификацией не хуже у-  
вержденных в разделе.**

## **6. Требования безопасности**

**6.1. При работе с реактивами соблюдают требования безопасности, установленные для работы с токсичными, едкими и легко-  
воспламеняющимися веществами по ГОСТ 12.1.005—88.**

6.2. При проведении анализов горючих и вредных веществ должны соблюдаться требования противопожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004—76.

6.3. При выполнении измерений с использованием жидкостного хроматографа соблюдают правила электробезопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.019—79 и инструкцией по эксплуатации прибора.

## 7. Требования к квалификации оператора

К выполнению измерений и обработке их результатов допускаются лица с высшим и средним специальным образованием, прошедшие обучение работе на жидкостном хроматографе.

## 8. Условия измерений

8.1. Приготовление растворов и подготовку проб к анализу проводят при температуре воздуха  $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ , атмосферном давлении 84,0—106,6 кПа и относительной влажности воздуха не более 80 %.

8.2. Выполнение измерений на жидкостном хроматографе проводят в условиях, рекомендованных технической документацией к прибору.

## 9. Подготовка к выполнению измерений

Перед выполнением измерений проводят следующие работы: приготовление растворов, подготовку жидкостного хроматографа, установление градиуровочной характеристики, отбор проб.

### 9.1. Приготовление растворов

9.1.1. Основной стандартный раствор бромадиалона в хлороформе с концентрацией 1 мг/см<sup>3</sup> готовят растворением 26,3 мг бромадиалона (с учетом процентного содержания основного вещества) в мерной колбе вместимостью 25 см<sup>3</sup>. Раствор устойчив в течение недели при хранении в холодильнике.

9.1.2. Стандартный раствор № 1 с концентрацией 40 мкг/см<sup>3</sup> готовят разведением 1,0 см<sup>3</sup> основного стандартного раствора хлороформом в мерной колбе, вместимостью 25 см<sup>3</sup>. Раствор устойчив при хранении в холодильнике в течение недели.

9.1.3. Градиуровочные растворы с концентрацией бромадиалона от 0,4 мкг/см<sup>3</sup> до 4,0 мкг/см<sup>3</sup> готовят соответствующим разбавлением стандартного раствора № 1 хлороформом. Растворы устойчивы при хранении в холодильнике в течение недели.

9.1.4. Состав элюента: А-ацетонитрил:метанол=1 : 1+0,5 % (по объему) ортофосфорной кислоты.

Градиент В-ортофосфорной кислоты 0,2 %-ный (по объему) готовят следующим образом: к 98,8 см<sup>3</sup> бидистиллированной воды приливают 0,2 см<sup>3</sup> ортофосфорной кислоты.

## 9.2. Подготовка прибора

Подготовку жидкостного хроматографа проводят в соответствии с руководством по его эксплуатации.

## 9.3. Установление градуировочной характеристики

Количественный анализ бромадиолона проводят методом абсолютной градуировки. Для этого вводят в хроматограф по 25 мм<sup>3</sup> каждого градуировочного раствора.

Градуировочный график строят в координатах: количество введенного бромадиолона (мкг) – площадь пиков (условные единицы). Градуировку выполняют не менее чем по 6 точкам, проводя 5 параллельных измерений для каждой концентрации, согласно табл. 1.

Таблица 1

### Растворы для установления градуировочной характеристики при определении бромадиолона

Стандартный раствор бромадиолона № 1, см <sup>3</sup>	Хлороформ, см <sup>3</sup>	Концентрация бромадиолона в градуировочном растворе, мкг/см <sup>3</sup>	Содержание бромадиолона в хроматографируемом объеме, мкг
0,25	24,75	0,4	0,01
0,5	24,5	0,8	0,02
1,0	24,0	1,6	0,04
1,5	23,5	2,4	0,06
2,0	23,0	3,2	0,08
2,5	22,5	4,0	0,1

Условия проведения анализа:

температура термостата колонки

20 °C;

градиент В

от 40 до 10 % за 10 мин;

скорость подачи элюента

0,5 см<sup>3</sup>/мин;

длина волны УФ-детектора

280 нм;

объем вводимой пробы

25 мм<sup>3</sup>;

время удерживания бромадиолона

10 мин 12 с.

Проверку градуировочного графика проводят не реже 1 раза в месяц и при изменении условий анализа.

#### *9.4. Отбор проб воздуха*

Воздух с объемным расходом 20 дм<sup>3</sup>/мин аспирируют через фильтр «синяя лента», помещенный в фильтродержатель. Для измерения 1/2 ОБУВ бромадиалона необходимо отобрать 240 дм<sup>3</sup> воздуха. Отобранные пробы могут храниться в течение месяца в пробирках с притертymi пробками.

### **10. Выполнение измерения**

Фильтр с отобранной пробой помещают в химический стакан вместимостью 25 см<sup>3</sup> и дважды экстрагируют хлороформом по 5 см<sup>3</sup>. Экстракты объединяют и переносят в остродонную колбу и упаривают на ротационном испарителе досуха при температуре не выше 50 °С. Степень десорбции бромадиалона с фильтра 97 %. Сухой остаток растворяют в 0,3 см<sup>3</sup> хлороформа. Хроматографический анализ проб выполняют в тех же условиях, что и хроматографирование градуировочных растворов.

Количественное содержание бромадиалона в хроматографируемом объеме (мкг) определяют по предварительно построенному градуировочному графику.

### **11. Вычисление результатов измерения**

Концентрацию бромадиалона в воздухе ( $C$ , мг/м<sup>3</sup>) вычисляют по формуле:

$$C = \frac{a \cdot v}{b \cdot V}, \text{ где}$$

$a$  – содержание бромадиалона в хроматографируемом объеме, найденное по градуировочному графику, мкг;

$v$  – общий объем раствора пробы, мм<sup>3</sup>;

$b$  – объем раствора пробы, взятой для анализа, мм<sup>3</sup>;

$V$  – объем воздуха, отобранного для анализа (дм<sup>3</sup>) и приведенного к стандартным условиям (прилож. 1).

### **12. Оформление результатов анализа**

Результат количественного анализа представляют в виде:

$C \pm \Delta \text{ мг/м}^3 P = 0,95$ , значение  $\Delta = 0,000023 + 0,13 C \text{ мг/м}^3$ , где

$\Delta$  – характеристика погрешности.

$C$  – значение массовой концентрации анализируемого компонента в пробе.

### 13. Контроль погрешности методики КХА

Значения характеристики погрешности, норматива оперативного контроля погрешности и норматива оперативного контроля воспроизводимости приведены в табл. 2.

Таблица 2

Диапазон определяемых концентраций бромадиалона, $\text{мг}/\text{м}^3$	Наименование метрологической характеристики		
	характеристика погрешности $\Delta$ , $\text{мг}/\text{м}^3$ , $p = 0,95$	норматив оперативного контроля погрешности, $K$ , $\text{мг}/\text{м}^3$ ( $p = 0,90$ , $m = 3$ )	норматив оперативного контроля воспроизводимости, $D$ , $\text{мг}/\text{м}^3$ ( $p = 0,95$ , $m = 2$ )
0,0005—0,005	$0,000023 + 0,13 C$	$0,0000069 + 0,18 C$	$0,000085 + 0,36 C$

Метрологические характеристики приведены в виде зависимости от значения массовой концентрации анализируемого компонента в пробе  $C$ .

#### 13.1. Оперативный контроль погрешности

Оперативный контроль погрешности выполняют в одной серии с КХА рабочих проб.

Образцами для контроля являются реальные пробы воздуха рабочей зоны. Объем отобранный для контроля пробы должен соответствовать удвоенному объему, необходимому для проведения анализа по методике.

После отбора пробы экстракт с фильтра делят на две равные части, первую из которых анализируют в точном соответствии с прописью методики и получают результат анализа исходной рабочей пробы —  $C_1$ .

Вторую часть разбавляют соответствующим растворителем в два раза и снова делят на две равные части, первую из которых анализируют в точном соответствии с прописью методики, получая результат анализа рабочей пробы, разбавленной в два раза ( $C_2$ ). Во вторую часть делают добавку анализируемого компонента ( $X$ ) до массовой концентрации исходной рабочей пробы ( $C_1$ ) (общая концентрация не должна выходить за верхнюю границу диапазона измерений) и анализируют в точном соответствии с прописью методики, получая результат анализа рабочей пробы, разбавленной в два раза, с добавкой ( $C_3$ ). Результаты анализа исходной рабочей пробы ( $C_1$ ), рабочей пробы, разбавленной в два раза ( $C_2$ ) и рабочей пробы,

разбавленной в два раза с добавкой ( $C_3$ ) получают по возможности в одинаковых условиях, т. е. их получает один аналитик с использованием одного набора мерной посуды, одной партии реагентов и т. д.

Решение об удовлетворительной погрешности принимают при выполнении условия:

$$|C_1 - C_2 - X| + |2C_2 - C_1| \leq K, \text{ где}$$

$C_1$  – результат анализа рабочей пробы;

$C_2$  – результат анализа рабочей пробы, разбавленной в два раза;

$C_3$  – результат анализа рабочей пробы, разбавленной в два раза, с добавкой анализируемого компонента;

$X$  – величина добавки анализируемого компонента;

$K$  – норматив оперативного контроля погрешности.

$$K = 0,0000069 + 0,18C \text{ мг/м}^3$$

### 13.2. Оперативный контроль воспроизводимости

Образцами для контроля являются реальные пробы воздуха рабочей зоны. Объем отобранный для контроля пробы должен соответствовать удвоенному объему, необходимому для проведения анализа по методике. После отбора пробы экстракт с фильтра делят на две равные части и анализируют в точном соответствии с прописью методики, максимально варьируя условия проведения анализа, т. е. получают два результата анализа в разных лабораториях или в одной, используя при этом разные наборы мерной посуды, разные партии реагентов. Два результата анализа не должны отличаться друг от друга на величину допускаемых расхождений между результатами анализа:

$$|C_1 - C_2| \leq D, \text{ где}$$

$C_1$  – результат анализа рабочей пробы;

$C_2$  – результат анализа этой же пробы, полученный в другой лаборатории или в этой же, но другим аналитиком с использованием другого набора мерной посуды и других партий реагентов;

$D$  – допустимые расхождения между результатами анализа одной и той же пробы.

$$D = 0,000085 + 0,36C \text{ мг/м}^3$$

## **МУК 4.1.1352—03**

При превышении норматива оперативного контроля воспроизводимости эксперимент повторяют. При повторном превышении указанного норматива  $D$ , выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля и устраниют их.

### **14. Нормы затрат времени на анализ**

Для проведения серии анализов из 6 проб требуется 1 ч 30 мин.

Методические указания разработаны: НИИ медицины труда РАМН (Е. Н. Грицун, А. В. Кудряшов); НПЦ «Родемос» (В. С. Лапко).

Приложение 1

**Приведение объема воздуха к стандартным условиям**

Приведение объема воздуха к стандартным условиям (Т 20 °С и давление 101,33 кПа) проводят по формуле:

$$V_{20} = \frac{V_t \cdot (273 + 20) \cdot P}{(273 + t) \cdot 101,33}, \text{ где}$$

$V_t$  – объем воздуха, отобранного для анализа, дм<sup>3</sup>;

$P$  – барометрическое давление, кПа (101,33 кПа = 760 мм рт. ст.);

$t$  – температура воздуха в месте отбора пробы, °С.

Для удобства расчета  $V_{20}$  следует пользоваться таблицей коэффициентов (прилож. 2). Для приведения воздуха к стандартным условиям надо умножить  $V_t$  на соответствующий коэффициент.

Приложение 2

**Коэффициенты для приведения объема воздуха к стандартным условиям**

° C	Давление Р, кПа/мм рт. ст.									
	97,33/ 730	97,86/734	98,4/ 738	98,93/742	99,46/ 746	100/ 750	100,53/754	101,06/758	101,33/760	101,86/764
-30	1,1582	1,1646	1,1709	1,1772	1,1836	1,1899	1,1963	1,2026	1,2058	1,2122
-26	1,1393	1,1456	1,1519	1,1581	1,1644	1,1705	1,1768	1,1831	1,1862	1,1925
-22	1,1212	1,1274	1,1336	1,1396	1,1458	1,1519	1,1581	1,1643	1,1673	1,1735
-18	1,1036	1,1097	1,1158	1,1218	1,1278	1,1338	1,1399	1,1460	1,1490	1,1551
-14	1,0866	1,0926	1,0986	1,1045	1,1105	1,1164	1,1224	1,1284	1,1313	1,1373
-10	1,0701	1,0760	1,0819	1,0877	1,0986	1,0994	1,1053	1,1112	1,1141	1,1200
-6	1,0540	1,0599	1,0657	1,0714	1,0772	1,0829	1,0887	1,0945	1,0974	1,1032
-2	1,0385	1,0442	1,0499	1,0556	1,0613	1,0669	1,0726	1,0784	1,0812	1,0869
0	1,0309	1,0366	1,0423	1,0477	1,0535	1,0591	1,0648	1,0705	1,0733	1,0789
+ 2	1,0234	1,0291	1,0347	1,0402	1,0459	1,0514	1,0571	1,0627	1,0655	1,0712
+ 6	1,0087	1,0143	1,0198	1,0253	1,0309	1,0363	1,0419	1,0475	1,0502	1,0557
+10	0,9944	0,9999	0,0054	1,0108	1,0162	1,0216	1,0272	1,0326	1,0353	1,0407
+14	0,9806	0,9860	0,9914	0,9967	1,0027	1,0074	1,0128	1,0183	1,0209	1,0263
+18	0,9671	0,9725	0,9778	0,9830	0,9884	0,9936	0,9989	1,0043	1,0069	1,0122
+20	0,9605	0,9658	0,9711	0,9783	0,9816	0,9868	0,9921	0,9974	1,0000	1,0053
+22	0,9539	0,9592	0,9645	0,9696	0,9749	0,9800	0,9853	0,9906	0,9932	0,9985
+24	0,9475	0,9527	0,9579	0,9631	0,9683	0,9735	0,9787	0,9839	0,9865	0,9917
+26	0,9412	0,9464	0,9516	0,9566	0,9618	0,9669	0,9721	0,9773	0,9799	0,9851
+28	0,9349	0,9401	0,9453	0,9503	0,9555	0,9605	0,9657	0,9708	0,9734	0,9785
+30	0,9288	0,9339	0,9391	0,9440	0,9432	0,9542	0,9594	0,9645	0,9670	0,9723
+34	0,9167	0,9218	0,9268	0,9318	0,9368	0,9418	0,9468	0,9519	0,9544	0,9595
+38	0,9049	0,9099	0,9149	0,9199	0,9248	0,9297	0,9347	0,9397	0,9421	0,9471

МУК 4.1.1352—4.1.1370—03

**МУК 4.1.1352—4.1.1370—03****Приложение 3****Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ**

	стр.
1. азаметиофос	54
2. 1-амидогуанидиний гидрокарбонат	37
3. боран-диметилсульфидный комплекс	129
4. бродифакум	15
5. бромадиалон	6
6. клотримазол	155
7. септабик	45
8. тексанол-эфирный спирт	137
9. триметилолпропан диаллиловый эфир	121
10. углекислый кальций	78
11. хлорфасинон	163
12. циангуганидин	62
13. эсбиотрин	95
14. эток	104

**Приложение 4****Вещества, определяемые по ранее утвержденным методическим указаниям по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны**

Название вещества	Опубликованные методические указания
1	2
Желатин	МУ № 1719—77 «Методические указания на гравиметрическое определение пыли в воздухе рабочей зоны и в системах вентиляционных установок». – Вып. 1—5. – М., 1981. – 235 с.
Крахмал	_____ » _____ » _____ » _____
Сахарная пудра (сахароза)	_____ » _____ » _____ » _____

**Измерение концентраций вредных веществ  
в воздухе рабочей зоны**

**Методические указания  
МУК 4.1.1352—4.1.1370—03**

**Выпуск 41**

**Редакторы Аванесова Л. И., Кожока Н. В.,  
Кучурова Л. С., Максакова Е. И.  
Технический редактор Климова Г. И.**

**Подписано в печать 30.12.05**

**Формат 60x88/16**

**Печ. л. 11,0**

**Тираж 500 экз.**

**Заказ 6471**

**Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
127994, Москва, Вадковский пер., д. 18/20**

**Оригинал-макет подготовлен к печати издательским отделом  
Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора  
117105, г. Москва, Варшавское ш., 19а.**

**Отделение реализации печатной продукции, тел. 952-50-89**

**Отпечатано в филиале Государственного ордена  
Октябрьской революции, ордена Трудового Красного Знамени  
Московского предприятия «Первая Образцовая типография»  
Федерального агентства по печати и массовых коммуникаций  
115114, г. Москва, Шлюзовая наб., 10. Тел. 235-20-30**